

Nu FONA


ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ И НАДЕЖНОСТЬ



N1 | N2 | N3

Создан на основе дизайнерской концепции немецких инженеров, после более чем 10 лет совершенствования. Установки NuFONA имеют прочную конструкцию, эргономичный дизайн, а также оснащены высокопроизводительными двигателями, обеспечивающие плавную работу и низкий уровень шума

- Эффективность с точным контролем положения кресла
- Гибкое управление высокой надежности
- Долговечны и удобны в использовании
- Удобство чистки и дезинфекции

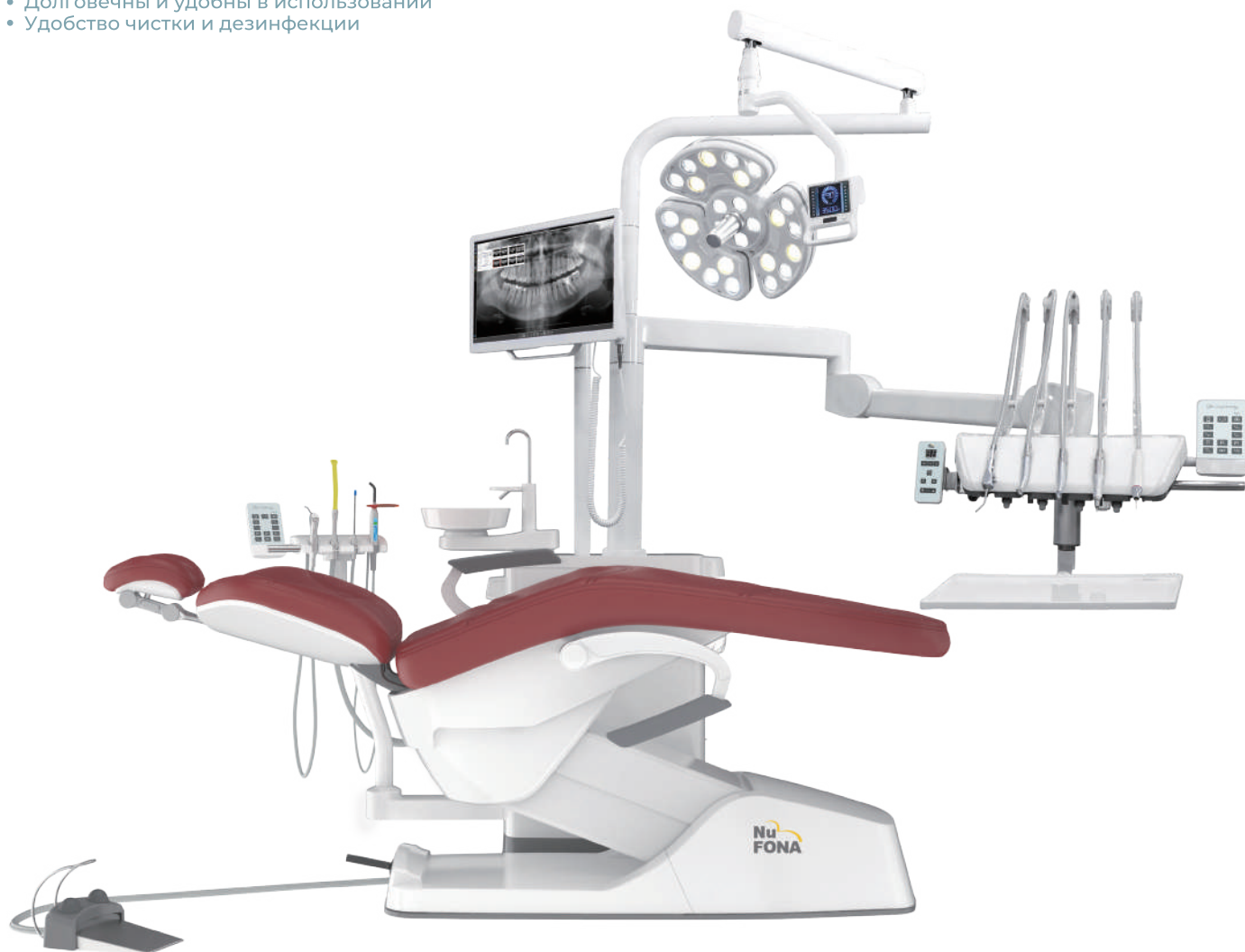

NuFONA N3

СПИНКА И СИДЕНЬ КРЕСЛА

Благодаря креслу, в котором сиденье и спинка могут перемещаться вперед и назад с помощью рычагов - лечение проходит с комфортом



НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Кресла имеют прочную конструкцию, основная рама которой состоит из литого алюминия и стальных деталей. Электростатическое порошковое напыление и антикоррозийная обработка делает всю металлическую часть крепче, устойчивой к царапинам и ударам



ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ

Блокировка кресла и столика с инструментами обеспечивают безопасную работу и позволяют избежать несчастных случаев, вызванных неосторожным перемещением кресла





NuFONA N1 NuFONA N3


Модуль врача с электронным управлением доступен как с верхней, так и с нижней подачей инструментов



NuFONA N2

Блок врача на мобильной версии можно свободно перемещать в диапазоне 760-960 мм. Подкатная система обеспечивает большее операционное пространство, удобное для различных амбулаторных операций и процедур, таких как имплантация



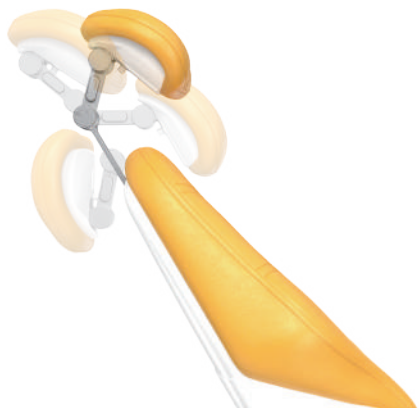


КОМФОРТ И ВНИМАНИЕ

Кресло с двойным шарнирным подголовником и удобным сиденьем, высоту которого можно свободно поднимать и опускать в диапазоне от 450 до 850 мм, включая функцию запоминания высоты

ЦВЕТА ШОВНЫХ КРЕСЕЛ



ЦВЕТА БЕСШОВНЫХ КРЕСЕЛ

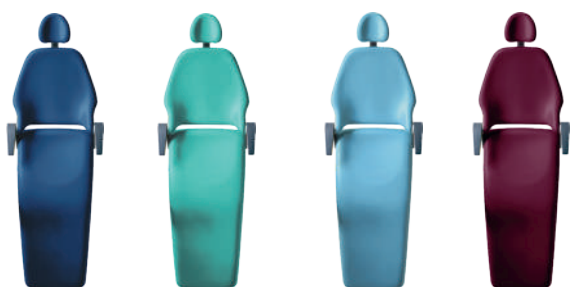

ПОВОРОТНЫЙ ПОДЛОКОТНИК

Правый подлокотник можно повернуть вперед, из-за этого пациентам легче вставать и садиться. А также можно держаться во время приема для снятия напряжения



Nu
FONA



NuFONA NT

РЕГУЛИРОВКА ЛОТКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Благодаря воздушному пневмовыключателю на ручке лотка из нержавеющей стали, можно регулировать в оптимальное положение простым нажатием кнопки



ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Главный выключатель для всего (воздуха, воды и электричества) позволяет избежать режима ожидания кресла, продлевая срок его службы и снижая вероятность несчастного случая во время простоев



ГИГИЕНА

Съемный комплект всасывающего фильтра и поворотный на 360° кран для воды из нержавеющей стали - делают очистку и дезинфекцию легкой и удобной




СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРОМЫВКИ ТРУБ



Система с 8 режимами для дезинфекции может одновременно дезинфицировать пистолет воздух - вода (пюстер), шланги наконечников и наполнителя стаканов. Доступен режим быстрой промывки

ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Поворотная чаша плевательницы и столика ассистента обеспечивают максимально возможное пространство для лечения

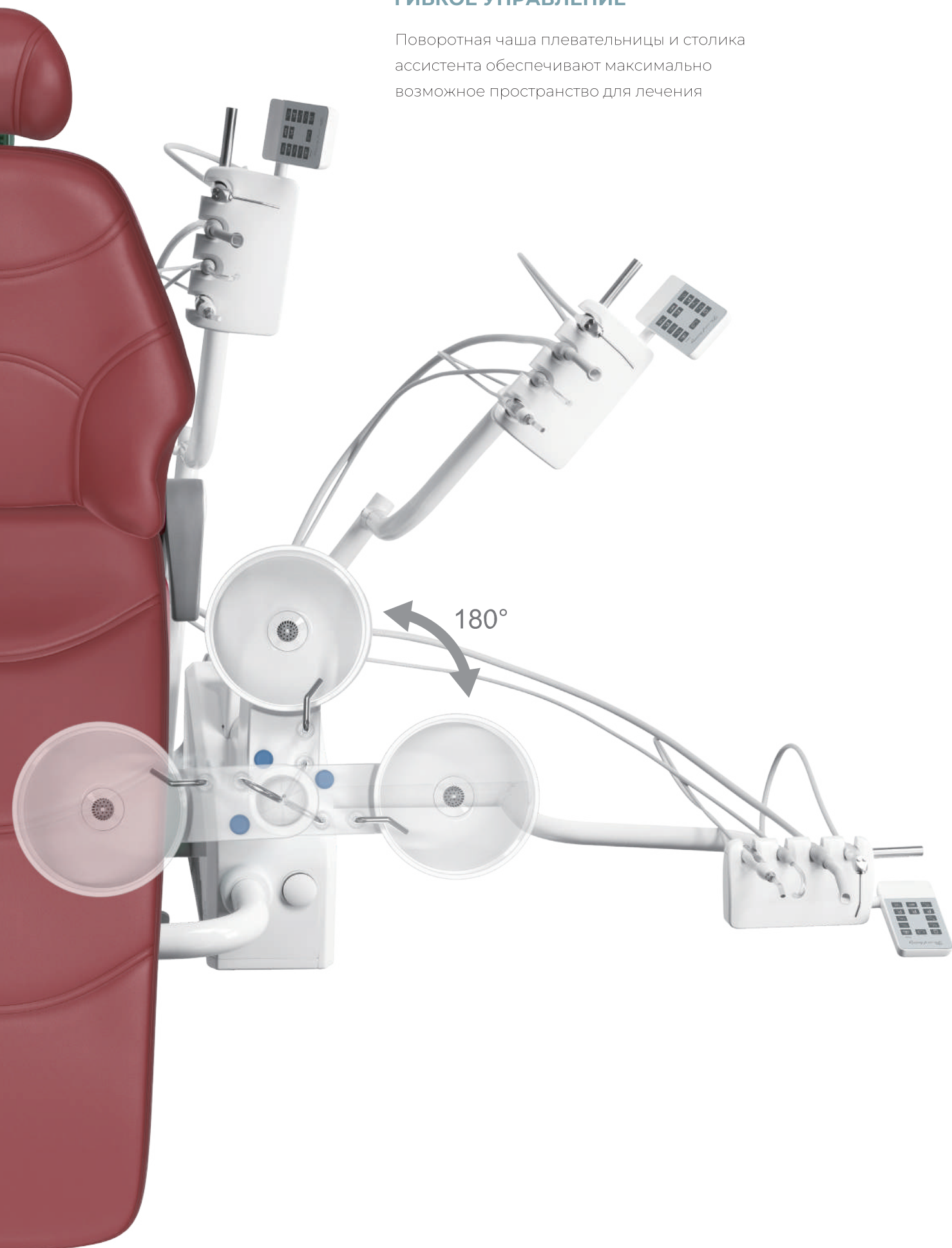



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИКРОМОТОР

- Возможность работы на стабильно высоких оборотах
- Низкий уровень шума



УМНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Чтобы избежать попадания прямого света в глаза пациента и возникновения дискомфорта во время лечения светодиодный светильник автоматически выключается при движении кресла и включается, когда кресло возвращается в положение лечения

	N1	N2	N3		N1	N2	N3
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
КРЕСЛО ПАЦИЕНТА				Бутылка с водой	да		
Электрическая система	да			Педаль		да	да
Система предотвращения столкновений	да			Опорная пластина			да
Блокировка инструментов при движении кресла	да			Напольный гидроблок			да
Левый подлокотник	да	да	да	СТАНДАРТНЫЙ БЛОК СТОМАТОЛОГА Блок врача с переключателем, воздушного клапана, пистолет воздух-вода, силиконовый коврик, который можно стерилизовать при 135 С	да – с панелью управления		
Правый откидной подлокотник			да				
Встроенный распределительный бокс	да						
Обивка	Да - шовная						
ГИДРОБЛОК							
Система Venturi для воздуха и воды			да	Электрический микро мотор	да		
Автоматическая система нагрева воды в стаканчике ополаскивателя			да	Стоматологический светильник	Светодиодный светильник	Светильник NUFONA-L8 LED	
Съемная чаша плевательницы	да			Премиум стул врача	Да - шовный		
Блок ассистента с 4 позициями инструментов (пистолет воздух-вода, пылесос, слюноотсос)	да – с панелью управления			Мобильная система блока врача		да	
				Лоток для инструментов из нержавеющей стали с воздушным клапаном		да	
		N1		N2		N3	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Напряжение	AC 220 V – 230 V/AC, 50 Hz/60 Hz						
Давление воды	0.25 - 0.4 MPa / 2.5 – 4 bar				0.2-0.4 MPa/ 2 – 4 bar		
Расход воды	≥ 10 л/мин						
Расход воздуха	80 л/мин (без системы Venturi) или 130 л/мин (с системой Venturi)						
Грузоподъемность	150 кг				165 кг		
Давление воздуха	0.55 – 0.80 MPa / 5.5 – 8.0 bar						
Всасывающая машина					≥ 255 л/мин с центральным всасыванием		
Диапазон перемещения кресла	480 - 780 мм						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ							
Внешний распределительный блок	✓	Правый подлокотник					✓
Блокирующий клапан (полумокрое всасывание)	✓	Ультразвуковой скалер					✓
Клапаны плевательницы и влажного всасывания	✓	Стул ассистента					✓
Стеклоплавильная чаша плевательницы	✓	Премиум стул ассистента					✓
Пульт управления креслом с 4-х позиционным джойстиком	✓	Мультимедийная система					✓
Система дезинфекции промывки труб	✓	Силиконовый коврик					✓
Система переключателей (Воздух-вода в воздух-воздух)	✓	Наконечник					✓
Система источника света для наконечников	✓						



официальный дистрибьютор NuFONA в России

ЭУР-МЕД Центр

г.Москва, Научный пр-д, д.19, оф.7

Тел: +7 (495) 123-39-98

www.stomeur.ru

shop@eurmed.ru



ЭУР-МЕД Денталдепо

г. Апрелевка, ул. Октябрьская, д. 9

Тел: +7 (496) 341-16-90

www.eurmed.ru

info@eurmed.ru

